



## Instrucciones de administración de infusores elastoméricos para el tratamiento antibiótico domiciliario

### ¿Qué es y para qué sirve?

Es un dispositivo que permite la administración intravenosa continua o intermitente de antibióticos a una velocidad controlada, sin necesidad de ingreso hospitalario.

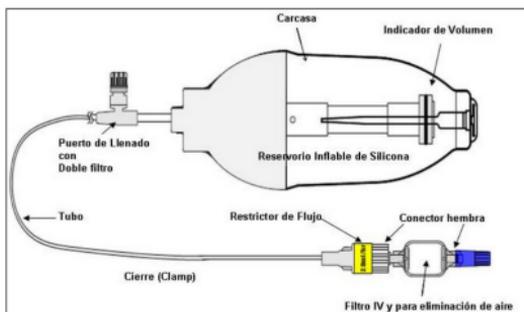


Figura 3.- Esquema de las partes básicas de un infusor

### Conservación

Conserve el infusor como se indica en la etiqueta (nevera o temperatura ambiente).



### Actividades permitidas durante el uso

- Actividades habituales (caminar, conducir, etc.)
- Evitar actividades extremas.
- Puede ducharse, mantener el infusor en una bolsa de plástico. Este puede mojarse, pero no sumergirse en agua.



Si detecta cualquier incidencia contacte con el Servicio de Farmacia en el 981-176489 o con su médico

### Administración



- Si se conserva en nevera, retirar al menos media hora antes de la administración.
- Mantener el infusor pegado al cuerpo al mismo nivel que el catéter.
  - Ejemplo: si tiene el catéter en el brazo, colocar el infusor pegado al abdomen a la altura del ombligo.
- Asegúrese que durante la infusión el clamp (pinza) esté abierto y que el tubo de conexión no esté doblado.
- Coloque el tubo de conexión en contacto con la piel. Sin gases ni otros elementos entre el tubo y la piel.
- No colocar el infusor en el suelo o colgando sobre la cabeza.
- La infusión habrá finalizado cuando el reservorio esté completamente deshinchado, ahí, puede desconectar el infusor.
- Tras cada cambio de infusor inyectar en el catéter 3 mL de Fibrilin.